



Pluslife SARS-CoV-2 / Influenza A / Influenza B Testkarte

SARS-CoV-2

IVA

IVB



Molekularbiologische Diagnostik zum
Nachweis von Atemwegserkrankungen
Schnell, sicher und unkompliziert

Pluslife SARS-CoV-2/ Influenza A/Influenza B Testkarte

Pluslife Mini Dock ist ein molekularbiologisches Schnelldiagnosesystem, das mit hoher Genauigkeit SARS-CoV-2, Influenza-Virus A (IVA) und Influenza-Virus B (IVB) nachweist. Die von Pluslife entwickelte Methode (RHAM) beruht auf der isothermalen Nukleinsäure-Amplifikationstechnologie und liefert zuverlässige Resultate, vergleichbar mit einem PCR-Test. Das Gerät ist einfach zu bedienen, kompakt und mobil einsetzbar. Die Ergebnisse liegen bereits nach maximal 35 Minuten vor.

Merkmale




SCHNELL

Ergebnis innerhalb von 35 Min.


EINFACH

Testvorbereitung 3 Min.



GENAU

Nachweisgrenze (LoD)
1000 Kopien/mL


EFFIZIENT


In 4 Schritten von der Probe
zum Ergebnis

Testdurchführung

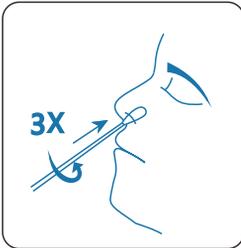


1. Probennahme

Probennahme durch
Nas^}trich

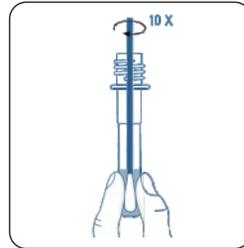

2. Probe mischen

Tupfer in das Röhrchen einführen,
mischen, 10-mal ausdrücken, dann
Tupfer entsorgen

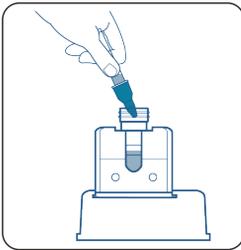

3. Proben transfer

Überführen der Probe
in die Testkarte




4. Verteilung der Probe

Probe wird durch Drücken des Deckels
in die Reaktionskammern injiziert



5. Testdurchlauf

Einschalten des Geräts und Verbindung
mit der App, Reaktionskarte einlegen
und Test starten

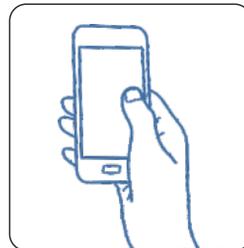

6. Testergebnis ablesen

Ablesen der Testergebnisse
in der App

Anwendungsbereiche



Praxis




Krankenhaus



Testcenter

Spezifikationen

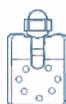

Pluslife Mini Dock	
Abmessungen	101 x 91 x 65 mm
Gewicht	210 g
Software	Smartphone-App oder PC
Einsatztemperatur	15–30 °C
Luftfeuchtigkeit	≤ 80%

Pluslife SARS-CoV-2/ IVA/IVB Testkarte	
Zielpathogene	SARS-CoV-2, IVA, IVB
Nachweisgrenze (LoD)	1000 Kopien/mL
Durchlaufzeit (TAT)	35 Min.
Haltbarkeit	9 Monate bei Raumtemperatur
Probennahme	Nasalabstrich

Guangzhou Pluslife Biotech Co.,Ltd

📍 Floor 3, Block E, Runhui Science & Technology Park, No. 18 Shenzhou RD, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China

☎ +86-20-31703986

✉ market@pluslife.com

🌐 www.pluslife.com



Website



LinkedIn



Line

PLCOVFLUAB-INT-20230322

Ihr Vertriebspartner in Deutschland



Haben Sie Fragen?

KONTAKTIEREN SIE UNS
📞 +49 - 0151 - 8002380